



PATIENT WARM AND HEATING HEATER

HEATER

患者保温・加温ヒーター

- スピーディな加温

短時間で設定温度に到達

- 広い使用範囲

電源さえあれば様々な場面で使用が可能

- コンパクト設計

術者の邪魔にならない最小限の機器構成

- 簡単操作


操作が簡単でひとりでも

セッティングが可能

- 使用環境への少ない影響

温水やエアーを使用しないので


静寂で空気も汚さずクリーン

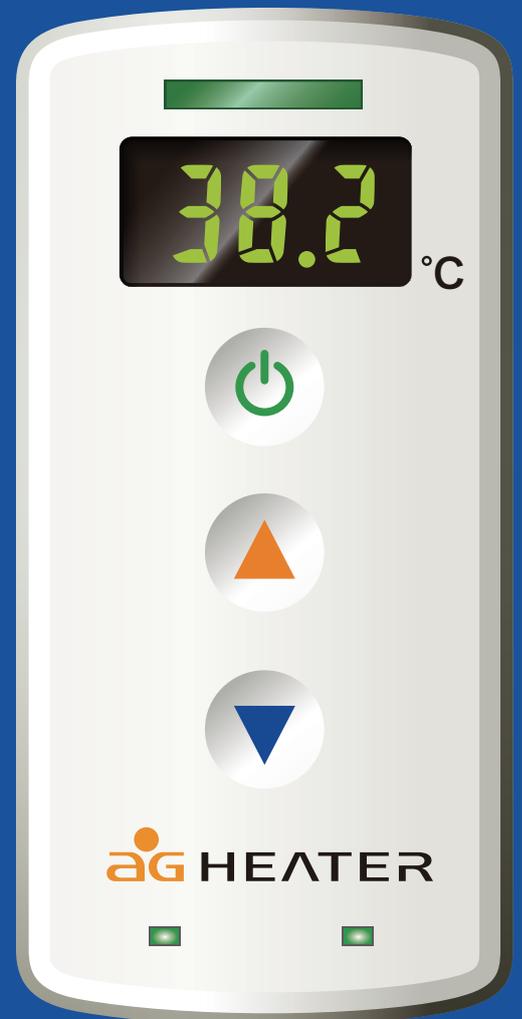

原寸大

Melcs

体温管理を迅速にサポート

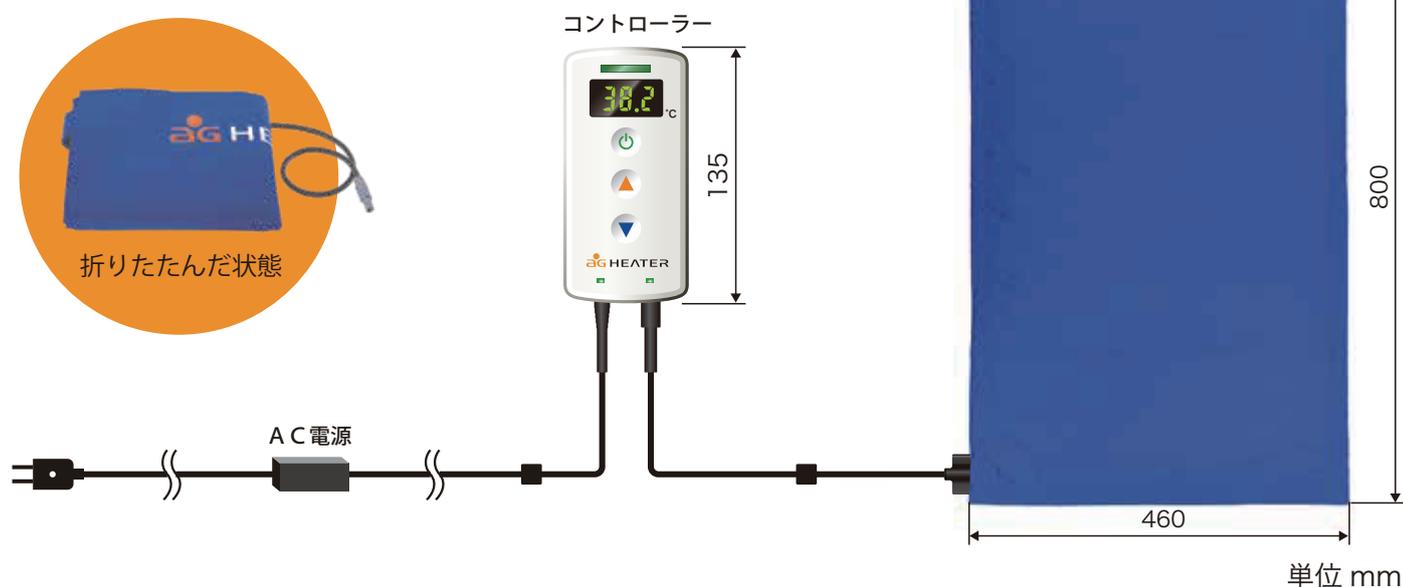

仕様 / 規格

販売名	AGヒーター	
型式	AGH010	
温度調節方式	32.0℃～40.0℃ 0.5℃きざみ	
外形サイズ	800mm×460mm×3mm (縦×横×厚み)※本体プッシュ部を除く	
重量	260g (マット本体)	
電氣的定格	本体 DC12V 専用ACアダプター AC100V-240V 50/60Hz 1.5-0.7A	
電撃に対する保護形式の分類	本体 クラスII機器 専用ACアダプター クラスI機器	
電撃に対する保護の程度による装着部の分類 ...	BF形装着部	
分類	管理医療機器 クラスII	
一般的名称	電気パッド加温装置コントロールユニット 36955000	
安全性に関する規格	JIS T 0601-1:2012+Amd1:2014 JIS T 0601-1-2:2012	
製造業者	株式会社コスミックエムイー	医療機器製造業登録番号:11BZ200229
製造販売業者	日本メルクス株式会社	第二種医療機器製造販売業許可番号:13B2X10256
医療機器認証番号	228AGBZX00019000	
製品概要	マット本体、コントローラー、AC電源	
別売品	ディスポカバー、リユースカバー (吸水タイプ/完全防水タイプ)	

Melcs 製造販売業者
日本メルクス株式会社

〒110-0035 東京都台東区西浅草 3-22-3-1408
TEL.03-5830-0200 FAX.03-5830-0210

<http://www.j-melcs.com>

——— カスタマーセンター ———

〒190-0022 東京都立川市錦町 4-5-3 丸木ビル
TEL.042-526-5757 FAX.042-526-5772




AGヒーターは術前・術中・術後の体温管理を迅速にサポートします

1 様々な使用シーン

- AGヒーターは管理医療機器（クラスⅡ）として手術室・ICU・NICU・病棟・治療室などにおいて小児から大人まで様々なシーンで使用できます。

2 温度制御

- AGヒーターならではの素早い加温レスポンスと精密な温度制御を実現しました。

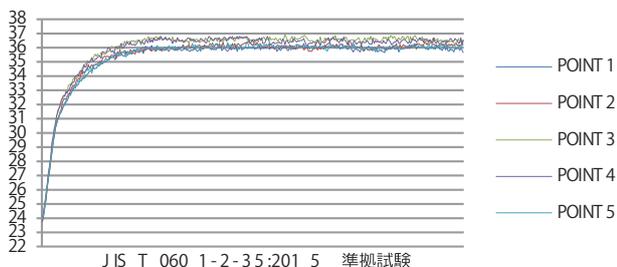

3 サーモグラフィー画像

- AGヒーターは面状に発熱するため均熱性が保たれています。



4 使用例

- 患者様の上に掛ける、下に敷く、足等に部分的に掛けて加温・保温することができます。

